



PROACTIV®



30cm



**AVEC LIFT ACTIV
TU ATTEINS PLUS.**

Le **LIFT activ** avec réglage de la hauteur d'assise te permet d'être flexible au quotidien ainsi que dans de nombreux métiers et différents postes de travail. Tu atteins sans peine les machines, les meubles, les équipements de cuisine, les imprimantes et les étagères. Souvent, aucun travail de construction n'est nécessaire. Avec seulement 14,5 kg, le **LIFT activ** séduit par son design léger et dynamique et par son transport aisé.

LIFT activ



#Indépendance

Avec le **LIFT activ**, tu maîtrises ton quotidien de manière encore plus autonome. En faisant les courses, tu peux atteindre les produits en haut des étagères sans aide extérieure et tu es indépendant.



#À hauteur de regard

Avec le réglage continu de la hauteur d'assise, le siège se relève de jusqu'à 30 cm. Dans cette position, tu te trouves à hauteur de regard avec une personne debout mesurant env. 1,75 m.




#Flexibilité

Ton **LIFT** s'adapte à toi : Le point de basculement se règle a posteriori pour s'adapter à tes besoins.



#Autonomie

Grâce à l'optimisation du poids, au dossier pliant et au retrait sans outil des modules, tu peux transporter aisément ton **LIFT activ**.

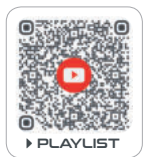

PLAYLIST




TA CLÉ POUR PLUS D'INDÉPENDANCE.

Ton **LIFT activ** est fabriqué sur mesure pour toi en s'adaptant à tes besoins. Tu as un grand choix d'équipements, depuis les repose-pieds et les freins en passant pour les poignées de poussée jusqu'aux systèmes d'assise et de dossier ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant. De cette manière, ton LIFT activ est exactement comme tu en as besoin.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.

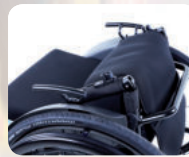

Le dossier rabattable au niveau de l'articulation lombaire permet également d'optimiser rapidement et facilement les dimensions de rangement pour le transport.



La potence amovible et pivotante avec repose-pieds à palette séparée offre beaucoup de place pour ton transfert.



Le repose-pieds replié vers l'arrière se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise : 35 - 46 cm (en pas de 1 cm)

Profondeur d'assise : 35 - 48 cm (en pas de 1 cm)

Hauteur dossier : 20 - 48 cm (en pas de 1 cm)

Longueur de potence : 30 - 48 cm (en pas de 1 cm)

Hauteur d'assise à l'arrière : 41 - 43 cm (en pas de 1 cm)

Hauteur d'assise à l'avant : 45 - 51 cm (en pas de 1 cm)

Point de basculement : 6 - 10 cm (en pas de 1 cm)

Poids total du produit : à partir de 14,5 kg

Poids de charge max. standard : jusqu'à 100 kg

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/