



PROACTIV®



TRAVELER 4you Ergo

L'AJUSTEMENT PARFAIT RENCONTRE DES DIMENSIONS DE TRANSPORT MINIMALES

Le TRAVELER 4you Ergo est ton fauteuil roulant pliant actif sur mesure avec géométrie de cadre filigrane et assise coudée ergonomique. Tu peux sélectionner 12 paramètres comme l'angle de potence, le retrait du cadre, l'empattement ou la position de la fixation des roues avant. Le cadre est fabriqué entièrement selon tes souhaits comme pièce unique. Avec des dimensions de transport compactes à partir de 17 x 35 x 58 cm, tu peux embarquer ton TRAVELER 4you Ergo même dans un sac de sport. Tu peux ajuster à tes besoins également a posteriori de nombreux réglages, comme le point de basculement, la hauteur d'assise, l'inclinaison de l'assise ou l'angle du dossier.




#Fiabilité

Grâce à l'excellente stabilité, tu peux combiner ton TRAVELER 4you Ergo avec des bikes adaptatifs, des appareils de tractions et des fourches ainsi que d'autres adaptateurs.



#Personnalisation

Avec 12 paramètres à sélectionner, chaque cadre devient une pièce unique. La potence peut être réalisée avec un retrait de cadre.

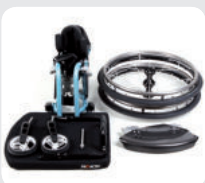


#Autonomie

Avec ses petites dimensions de transport, le dossier pliant et le retrait sans outil des modules, le TRAVELER 4you Ergo se transporte aisément.



#Plusdemobilité

Grâce au pliage simple, tu peux réduire la largeur d'assise (assis dans le fauteuil) de 15% ou de 5-10 cm pour pouvoir passer sans peine les passages étroits.

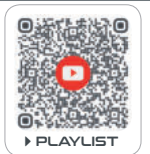


ADAPTATION SUR MESURE, DESIGN ERGONOMIQUE.

Ton **TRAVELER 4you Ergo** est fabriqué sur mesure selon tes besoins, depuis les dimensions du cadre jusqu'à l'équipement. Tu as le choix parmi les options telles que les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes d'assise et de dossier, les protège-vêtements, les accoudoirs ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant pour que ton TRAVELER soit parfaitement adapté.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.

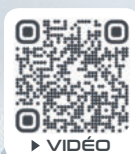

Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



PACK D'ÉQUIPEMENT « PURE » :

Avec ce pack, tu atteins un poids total particulièrement léger à partir de 10 kg, ce qui pose de nouveaux jalons en matière de légèreté. Il offre des fonctionnalités innovantes, optimisées au niveau du poids comme les parties latérales en carbone avec protège-vêtements intégré, un dossier adaptable « light » avec rembourrage ainsi qu'un repose-pieds léger avec palette arrondie sans saillie.



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	33 - 52 cm (en pas de 1 cm) 33 - 42 cm pour équipement « pure »
Profondeur d'assise :	35 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	22 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	37 - 51 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	39 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	42 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	3 - 11 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 11,2 kg à partir de 10,0 kg pour équipement « pure »
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.