



PROACTIV®



NJ1 bike adattivo

IL BIKE ADATTIVO NJ1 – LA FLESSIBILITÀ INCONTRA IL COMFORT

Il **bike adattivo NJ1** è un ausilio di trazione manuale leggero e stabile, pensato per il tempo libero e lo sport. La bicicletta si aggancia facilmente alla sedia a rotelle e consente movimenti ergonomici e il superamento di tragitti più lunghi. La ruota motrice più grande facilita il superamento di irregolarità del terreno e ostacoli, mentre i componenti di alta qualità del cambio e dei freni garantiscono un controllo preciso. Grazie alla dotazione variabile, la NJ1 può essere configurata individualmente, dalla bicicletta da escursione a quella sportiva.



#LeggeraEPotente

Il bike adattivo NJ1 unisce la leggerezza a un'elevata stabilità e a eccellenti caratteristiche di guida. È quindi la compagna ideale per il tempo libero, lo sport e le escursioni più lunghe.



#FacilitàD'uso

Recupero e sicurezza. Con l'NJ1 e-assistant, l'assistente alla discesa carica la batteria ed estende l'autonomia. Entrambi i modelli NJ1 offrono anche freni di alta qualità per una guida sicura.



#AdattamentoStabile

Grazie all'adattatore centrale o frontale, il bike adattivo NJ1 può essere agganciata alla sedia a rotelle in modo rapido e sicuro, garantendo un adattamento affidabile e una maneggevolezza ottimale.



#IlVostroNJ1LaVostraScelta

Molte opzioni per la vostra handbike perfetta. Ogni bike NJ1 è personalizzato. Un'ampia gamma di opzioni e accessori rende l'NJ1 il vostro bike.



AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PER LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE.

Il **bike adattivo NJ1** offre configurazioni flessibili per un'esperienza di guida ottimizzata. Le numerose opzioni di equipaggiamento, come il pratico cavalletto, e la scelta di vari cambi e freni di alta qualità rendono la guida confortevole e facile.

OPZIONI SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Le distanze tra le manopole e le lunghezze delle pedivelle personalizzabili, insieme al supporto del movimento centrale regolabile, garantiscono un adattamento ottimale alle tue esigenze.



Cambio perfetto. Il bike adattivo NJ1 offre un'ampia scelta di sistemi di cambio, dal cambio a catena al cambio integrato nel movimento centrale. Meccanico o elettrico: a te la scelta!



Freni affidabili, massimo controllo. Con i freni a disco, sui cerchioni o, in opzione, a contropedale, vai sul sicuro.






Il freno di retromarcia opzionale con funzione di sblocco delle pedivelle consente di disaccoppiare le pedivelle per procedere in retromarcia con gli anelli di presa della sedia a rotelle – ideale negli spazi ristretti.

DATI TECNICI

Tipo di motorizzazione:	manuale con cambio marce
Caratteristiche:	stabile e con eccellenti prestazioni di guida; allestimento variabile, dalla moto da turismo alla moto sportiva, fino alla moto fuoristrada
Peso totale senza adattatore:	da 8,3 kg
Ingombro:	da 115 x 43 x 50,8 cm
Dimensioni della ruota motrice:	20" 24"
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 140 kg di carico rimorchiato e 10 kg di carico utile
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 170 kg di carico rimorchiabile; carichi rimorchiabili superiori su richiesta
Cambi:	cambio a deragliatore o al mozzo con funzionamento sull'impugnatura cambio al movimento centrale
Freni:	freno a disco freno sul cerchione freno a contropedale

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

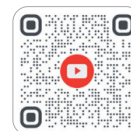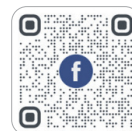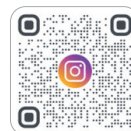

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 08/2026_01

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.