



PRO[®]ACTIV



30cm



LIFT activ

CON LIFT ACTIV
È POSSIBILE OTTENERE DI PIÙ.

La LIFT activ con regolazione dell'altezza del sedile vi rende flessibili nella vita di tutti i giorni, ma anche in diverse professioni e postazioni di lavoro. Puoi raggiungere senza sforzo macchinari, mobili, attrezzature da cucina, stampanti e scaffali – spesso senza bisogno di alcuna modifica strutturale. Con un peso di soli 14,5 kg, la LIFT activ convince per il suo design leggero e dinamico e per la facilità di trasporto. Oltre alla versione meccanica, la LIFT activ è disponibile anche in versione elettrica. Questa ti consente una regolazione comoda e continua dell'altezza del sedile con la semplice pressione di un pulsante: l'ideale per una maggiore autonomia, efficienza ed ergonomia nella vita quotidiana e nel lavoro.



#L'indipendenza

Con la LIFT activ, potete gestire la vita quotidiana in modo ancora più indipendente. Quando si fa la spesa, si può raggiungere la merce dagli scaffali più alti senza assistenza e si è indipendenti.



#All'altezzaDegliOcchi

Grazie alla regolazione continua dell'altezza, il sedile si solleva fino a 30 cm. In questa posizione ci si trova all'altezza degli occhi di una persona in piedi di circa 1,75 m di altezza.




#ComfortConUnPulsante

La LIFT activ elettrico ti consente di regolare l'altezza del sedile in modo continuo con la semplice pressione di un pulsante – in modo preciso e senza sforzo, per una maggiore autonomia nella vita quotidiana.



#Autonomia

Grazie all'ottimizzazione del peso, allo schienale pieghevole e allo smontaggio senza attrezzi dei componenti, è possibile trasportare facilmente la LIFT activ.

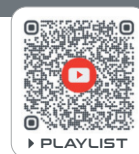


LA CHIAVE PER UNA MAGGIORE INDIPENDENZA.

La vostra **LIFT activ** è personalizzata per soddisfare le vostre esigenze individuali. Avete un'ampia scelta di equipaggiamenti: dalle pedane e dai freni alle maniglie di spinta, ai sistemi di sedili e schienali, alle ruote motrici e alle rotelle. In questo modo la LIFT activ è esattamente ciò di cui avete bisogno.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.

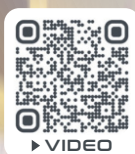

Lo schienale può essere ripiegato in corrispondenza dell'articolazione lombare, rendendo facile e veloce l'imballaggio per il trasporto.



Le pedane removibili e girevoli con poggipiedi diciso offre molto spazio per i trasferimenti





Il poggipiedi è ripiegabile sul retro per una maggiore maneggevolezza e flessibilità nell'uso quotidiano.

DATI TECNICI

Larghezza del sedile:	35 - 46 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	35 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	30 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	41 - 43 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	45 - 51 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	6 - 10 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	meccanico: da 14,5 kg elettrico: da 23 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 100 kg

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

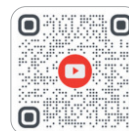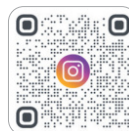

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 07/2026_01

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.