



PROACTIV®



NJ1

handbike adaptatif

LE HANDBIKE ADAPTATIF NJ1 – LA FLEXIBILITÉ RENCONTRE LE CONFORT

Le **handbike adaptatif NJ1** est un dispositif d'assistance à la traction manuel, léger et stable, destiné aux loisirs et au sport. Le vélo s'attache facilement au fauteuil roulant et permet d'effectuer des mouvements ergonomiques ainsi que de parcourir de longues distances. La roue motrice plus grande facilite le franchissement des irrégularités du sol et des obstacles, tandis que les composants de haut de gamme du dérailleur et des freins garantissent un contrôle précis. Grâce à ses options d'équipement variables, le NJ1 peut être configuré sur mesure, du vélo de randonnée au vélo de sport.



#LégerEtPerformant

Le handbike adaptatif NJ1 allie légèreté, grande stabilité et excellentes qualités de conduite. Il est ainsi le compagnon idéal pour les loisirs, le sport et les longues randonnées.



#FacilitéD'utilisation

Ce support pratique facilite l'attelage et le dételage et garantit un stationnement en toute sécurité. Pendant le trajet, il se replie pour gagner de la place.



#AdaptationStable

Grâce à l'adaptateur central ou avant, le handbike adaptatif NJ1 s'attache rapidement et en toute sécurité au fauteuil roulant, pour une adaptation fiable et une manipulation aisée.



#TonNJ1TonChoix

De nombreuses possibilités pour ton handbike parfait. Chaque vélo NJ1 est équipé individuellement. Une multitude d'options et d'accessoires font du NJ1 ton vélo.



DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION POUR UNE PERSONNALITÉ MAXIMALE.

Le **handbike adaptatif NJ1** offre des configurations flexibles pour une expérience de conduite optimale. De nombreuses options d'équipement, comme une béquille pratique, et un choix de différents dérailleurs et freins de qualité rendent la conduite confortable et facile.

OPTIONS AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :




Les largeurs de poignées et les longueurs de manivelles personnalisables, ainsi que le support de pédalier réglable, garantissent une adaptation optimale à tes besoins.



Un changement de vitesse parfait. Le NJ1 propose un large choix de systèmes de changement de vitesse, du dérailleur au changement intégré au pédalier. Mécanique ou électrique : c'est toi qui décides !



Des freins fiables, un contrôle maximal. Que ce soit avec des freins à disque, sur jante ou, en option, à rétropédalage, tu es entre de bonnes mains.

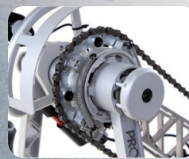



Le frein de recul optionnel avec fonction de débrayage des manivelles permet de désaccoupler les manivelles pour reculer à l'aide des poignées du fauteuil roulant – idéal dans les espaces restreints.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de propulsion :	manuel avec changement de vitesse
Particularités :	stable, avec d'excellentes qualités de conduite ; équipement modulable, allant de la moto de randonnée à la moto sportive, en passant par le tout-terrain
Poids total sans adaptateur :	à partir de 8,3 kg
Dimensions de transport :	à partir de 115 x 43 x 50,8 cm
Dimension de la roue motrice :	20" 24"
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 140 kg de poids tracté et 10 kg de charge
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 170 kg de charge remorquée ; charges remorquées supérieures sur demande
Changement de vitesse :	dérailleur ou moyeu à vitesses intégrées avec commande sur la poignée pédalier
Freins :	frein à disque frein sur jante frein à rétropédalage

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

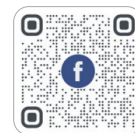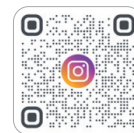

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 08/2026_01
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.