



PROACTIV®



SPEEDY 4teen

**FLEXIBLE, MANIABLE
ET PRÊT POUR CHAQUE DÉFI.**

Un cadre clair, une optimisation ciblée du poids et une finition de haute qualité confèrent au fauteuil roulant pour jeunes **SPEEDY 4teen** un caractère sportif. Il s'accorde parfaitement à toi avec ces huit paramètres à sélectionner. Le SPEEDY 4teen s'adapte simplement grâce au réglage de la hauteur d'assise et du point de basculement à tes besoins croissants. Ainsi, il t'assiste dans tes progrès au niveau de la manipulation du fauteuil roulant et favorise ton indépendance et ta mobilité.



#FonctionCroissance

La largeur d'assise augmente de 26 à 38 cm en remplaçant les modules, ce qui fait du SPEEDY 4teen ton accompagnateur fiable pendant de nombreuses années.



#Fiabilité

Le cadre stable et durable est synonyme de mobilité et d'une compatibilité maximales avec des entraînements et des adaptateurs supplémentaires.



#PlusDeMobilité

Les bikes adaptatifs et les appareils de traction peuvent s'accoupler en quelques gestes via un adaptateur.



#PositionD'assiseParfaite

Tu peux choisir entre un cadre droit ou en abduction. Le cadre d'abduction offre beaucoup d'espace pour les jambes et permet un positionnement spécial des jambes.



TON COMPAGNON DE ROUTE POUR PLUS DE MOBILITÉ.

Le **SPEEDY 4teen** est fabriqué spécialement pour tes besoins, aussi bien au niveau des dimensions du cadre que pour l'équipement. Tu peux choisir parmi de nombreuses options, dont les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes de dossier et d'assise, les protège-vêtements, les accoudoirs ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant. Ton SPEEDY 4teen devient exactement le fauteuil roulant parfait pour toi.


OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.

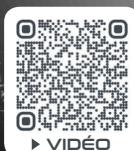

Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.






Pour la conduite avec Handbike, il est possible d'obtenir plus de traction à l'aide de l'extension d'empattement à retrait sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	26 - 43 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	32 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	20 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	36 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	40 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	1 - 10 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 9,2 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 100 kg

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

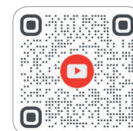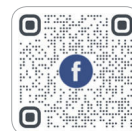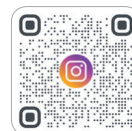

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/