



PROACTIV®



LITTY 4you

AVEC LE LITTY 4YOU,
LA LIBERTÉ GRANDIT EN MÊME TEMPS.

Le fauteuil roulant pour enfants LITTY 4you séduit par sa géométrie de cadre individuelle spécialement conçue pour les enfants. Grâce à son poids faible partant de 6,7 kg et à sa marche légère optimale, le LITTY 4you est particulièrement maniable et se manœuvre facilement, idéal aussi pour les enfants avec une faible motricité des bras. La structure du cadre sans tube avant limitant permet un positionnement du siège en abduction maximale. Le LITTY 4you peut être équipé en option d'un entraînement supplémentaire e-motion d'Alber avec amplification de force.



#Fonctioncroissance

Le LITTY 4you grandit avec l'enfant grâce aux modules échangeables et reste un accompagnateur fidèle au fil des ans.



#Personnalisation

Avec 10 paramètres sélectionnables pour le cadre et une largeur d'assise partant de 16 cm, le LITTY 4you permet une adaptation optimale. Le cadre et le protège-vêtements sont conçus et fabriqués sur mesure pour chaque LITTY 4you.




#Sécurité

La commande du frein à pousser est disposée de manière ergonomique dans le protège-vêtements et l'axe de frein est placé à l'extérieur de la zone de saisie afin d'éviter le coincement des doigts.



#Assistance

Les différentes poignées et arceaux de poussée permettent une assistance lors de la poussée, tandis que les freins de l'accompagnateur permettent de contrôler la vitesse.

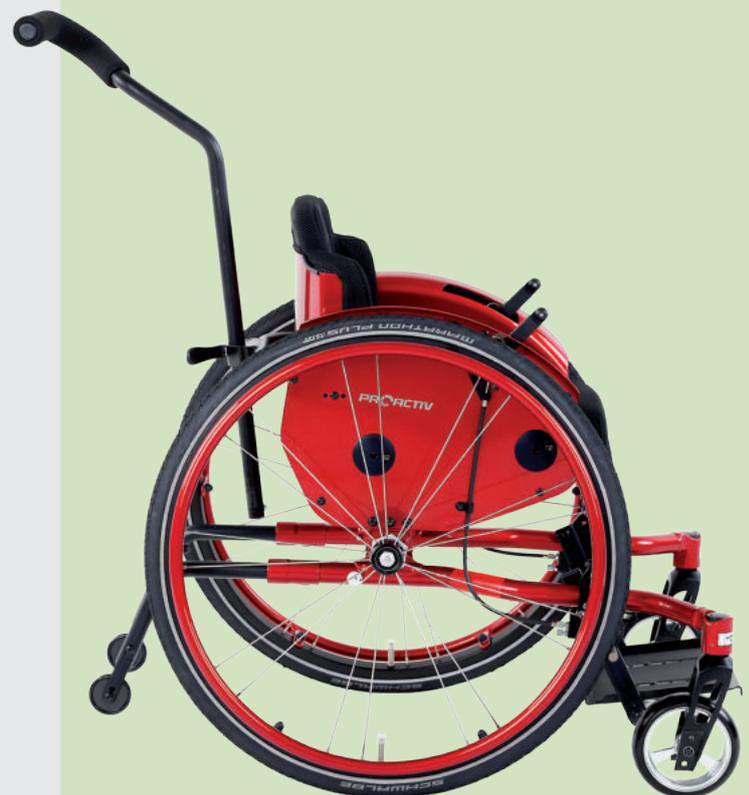

FAIT POUR LES ENFANTS, PRÊT POUR LES AVENTURES.

Le **LITTY 4you** est fabriqué sur mesure selon les besoins de l'enfant, depuis les dimensions du cadre jusqu'à l'équipement. De nombreuses options telles que les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes de dossier et d'assise ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant offrent des possibilités variées d'adaptation.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :




Le « repose-pieds relevable vers l'arrière » facilite pour les enfants encore capables de se tenir debout le transfert dans et hors du fauteuil roulant.



La tablette thérapeutique offre un plan de travail pratique, se retire sans outil, est réglable en hauteur et en inclinaison pour une adaptation optimale.



Avec la **fourche à roue tout chemin**, le LITTY 4you est apte au tout terrain pour les pavés, les graviers et les chemins forestiers. Les roues avant se soulèvent du sol et la roue de 12 pouces franchit sans peine les irrégularités. Grâce aux leviers de serrage rapide, la fourche à roue se pose facilement et sans outil.

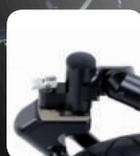

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	16 - 38 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	18 - 38 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 45 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	20 - 45 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	31 - 42 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	34 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	1 - 10 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 6,7 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 50 kg

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024_01
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.