



PROACTIV®



NJ1 & FREAK bike compatti

I BIKE COMPATTI NJ1 & FREAK – DIVERTIMENTO A CAVALLO PER GRANDI E PICCOLI

Il **bike compatto NJ1** e **FREAK** sono sinonimo di divertimento alla guida, flessibilità e personalizzazione. La struttura modulare consente di separare rapidamente l'unità di trasmissione dal telaio: l'ideale per il trasporto e lo stoccaggio. La geometria dello sterzo precisa, il passo lungo e la distribuzione equilibrata del peso garantiscono eccellenti caratteristiche di guida. La NJ1 è pensata per i ciclisti amatoriali ambiziosi, mentre il FREAK è studiata appositamente per soddisfare le esigenze di bambini e ragazzi. Entrambi i modelli possono essere configurati individualmente, dalla bici da turismo alla bici sportiva.




#MassimaFlessibilità

Il bike compatto NJ1 e FREAK possono essere smontati in due parti senza attrezzi: Unità motrice e telaio. È possibile separarli in pochi semplici passaggi e ridurre le dimensioni della confezione.



#ConfigurazionePersonalizzata

Grazie a un'ampia gamma di opzioni e accessori, il tuo bike compatto NJ1 o FREAK potrà essere adattata perfettamente alle tue esigenze. Sono disponibili opzioni adatte anche per utenti con limitazioni funzionali.

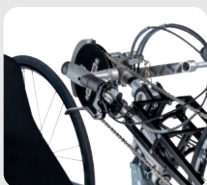

#CambiaComeVuoi

È possibile scegliere tra cambi al mozzo o a catena, nonché cambi meccanici ed elettronici, azionabili con una semplice mossa della mano o con il mento.



#BambiniERagazziInHandbike

Bike compatto FREAK: Leggero, compatto e maneggevole, perfettamente adattato alle esigenze dei giovani ciclisti.



NJ1



FREAK



NJ1 & FREAK – INDIVIDUALI COME VOI!

Il vostro bike compatto **NJ1** o **FREAK** è su misura per le vostre esigenze. Scegliete tra numerose opzioni: supporto del movimento centrale, sistemi di cambio e frenata, schienale, supporto per il collo e varianti di impugnatura. Da turismo o sportivo – NJ1/ FREAK si adatta perfettamente a voi. Il vostro handbike, la vostra scelta.

OPZIONI E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Design modulare: L'unità di propulsione il telaio possono essere separati in pochi secondi senza l'ausilio di attrezzi, facilitando il trasporto e lo stoccaggio.



Le possibilità di regolazione personalizzata del supporto del pedale, dello schienale e del poggiatesta garantiscono un comfort e un'ergonomia ottimali.



Freni affidabili, massimo controllo. Con i freni a disco o il freno a contropedale opzionale, con entrambi i modelli vai sul sicuro.






Cambio perfetto. Entrambi i modelli offrono un'ampia scelta di sistemi di cambio, da quelli a catena a quelli al mozzo fino a quelli integrati nel movimento centrale. Meccanico o elettrico: a te la scelta!

DATI TECNICI

Caratteristiche:	Stabile e con eccellenti prestazioni di guida, allestimento variabile dalla moto da turismo alla moto sportiva
Peso totale:	Bike compatto NJ1: da 15,8 kg Bike compatto FREAK: da 14,8 kg
Ingombro bike compatto NJ1:	Telaio da 104 x 43 x 39 cm Unità motrice da 105 x 43 x 66 cm
Ingombro bike compatto FREAK:	Telaio da 102 x 43 x 37 cm Unità motrice da 99 x 43 x 50,8 cm
Possibili dimensioni delle ruote anteriori:	20" 26"
Lunghezze del telaio:	102 cm 116 cm
Larghezze del sedile:	35 cm 39 cm 43 cm
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 100 kg di carico utile
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	Autorizzazione individuale fino a 120 kg [solo per il bike compatto NJ1]

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

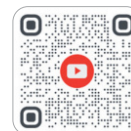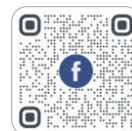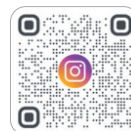

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 08/2026_01
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.