



PRO^{ACTIV}



HUSK-E

PUISSANT ET INCROYABLEMENT PETIT POUR LE TRANSPORT

Le vélo adaptatif **HUSK-E** combine flexibilité, performance et confort dans un design compact. Le support de pédalier rabattable assure un faible encombrement – idéal pour le transport. Trois variantes sont disponibles : la **version Shimano** pour des performances intelligentes avec des options de changement de vitesse et de commande polyvalentes ainsi qu'un changement de vitesse automatique confortable ; la **version Bafang** pour une puissance maximale et une assistance directe dès le premier tour de pédale avec une aide au démarrage pratique via une poignée d'accélérateur ; et la **version manuelle** pour une autopropulsion sportive. Pour les enfants plus grands et les adolescents, le HUSK-E est disponible avec un support de pédalier court. Un choix de dérailleur individuel, des possibilités de réglage ergonomiques et des freins efficaces garantissent le meilleur confort de conduite et la sécurité.



#PerformanceQuiEnthousiasme

Assistance puissante jusqu'à 25 km/h. Que ce soit sur le plat ou en montagne : Le système d'entraînement du HUSK-E t'assiste jusqu'à 25 km/h. Maîtrise sans peine les longues distances et profite de la liberté de mouvement.



#CompactEtFlexible

Le HUSK-E révolutionne le transport des handbikes : le support de pédalier rabattable permet de réduire rapidement et facilement la taille du vélo adaptatif. Idéal pour les déplacements et peu encombrant lors du rangement.



#EndurancePourChaqueTour

Grande capacité de batterie et option de double batterie. Avec une autonomie allant jusqu'à 100 km et la possibilité d'un support de batterie double, les longues randonnées ne sont pas un problème.



#TroisVariantesPourChaqueExigence

HUSK-E existe en version Shimano (performances intelligentes), Bafang (puissance maximale dès le premier tour de pédale) ou en version manuelle – selon tes besoins.



CONFIGURABLE DE MANIÈRE FLEXIBLE POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS.

Le **HUSK-E** s'adapte à toi, que ce soit avec une assistance électrique ou en tant que vélo manuel sans moteur. Dérailleurs, freins et adaptations ergonomiques assurent un confort maximal. La béquille de pédalier rabattable, la béquille pratique et la grande autonomie le rendent apte à la randonnée et facile à transporter.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



► VIDÉO



Adaptation fiable et manipulation facile. Avec un adaptateur central ou frontal, le HUSK-E se monte rapidement sur le fauteuil roulant. La béquille pratique facilite en outre l'attelage et le dételage.



Une ergonomie parfaite pour un confort maximal. Les largeurs de poignées et les longueurs de manivelles individuelles ainsi que le support de pédalier réglable font du HUSK-E ton compagnon idéal.



La version manuelle du HUSK-E offre une expérience de conduite sportive – sans moteur. Idéal pour tous ceux qui souhaitent faire du vélo activement et améliorer leur endurance.





Des sacoches à bagages avec supports sont disponibles en option. Les sacoches d'un volume de 5,8 l offrent suffisamment de place pour tes achats.

DONNÉES TECHNIQUES

Données sous réserve de modifications techniques.

Moteurs : [pour l'équipement avec assistance électrique]	Shimano 85 Nm 3,0 kg Bafang 110/130 Nm 3,3 kg
Batteries : [pour l'équipement avec assistance électrique]	Shimano 36 V 14 Ah 504 Wh 2,6 kg Autonomie env. 45 - 75 km Shimano 36 V 17,5 Ah 630 Wh 3,5 kg Autonomie env. 55 - 85 km Bafang 48 V 14,5 Ah 696 Wh 3,77 kg Autonomie env. 60 - 100 km
Poids total sans adaptateur :	Pour la version électrique : à partir de 14,1 kg (sans batterie) Pour la version manuelle : à partir de 11,4 kg
Dimensions de transport :	à partir de 80 x 43 x 80 cm
Dimension de la roue motrice :	20"
Auxiliaire de poussée/assistance au démarrage : [pour l'équipement avec assistance électrique]	Shimano : jusqu'à 4 km/h en marche avant Bafang : jusqu'à 6 km/h en marche avant

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

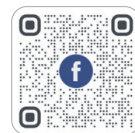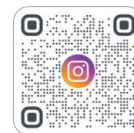

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 08/2026
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.