



PRO[®]ACTIV



HUSK-E

POTENTE E INCREDIBILMENTE PICCOLO DURANTE IL TRASPORTO

Il Bike adattivo HUSK-E combina flessibilità, prestazioni e comfort in un design compatto. Il supporto del movimento centrale ripiegabile garantisce un ingombro ridotto, ideale per il trasporto. È possibile scegliere tra tre versioni: la **versione Shimano** per prestazioni intelligenti con opzioni di cambio e comando versatili e un comodo cambio automatico; la **versione Bafang** per la massima potenza e un supporto diretto fin dal primo giro di pedale con una pratica funzione di assistenza alla partenza tramite manopola dell'acceleratore; e la **versione manuale** per l'autopropulsione sportiva. Per i bambini e i ragazzi più grandi, l'HUSK-E è disponibile con un supporto per il movimento centrale corto. La selezione personalizzata delle marce, le opzioni di regolazione ergonomiche e i freni efficienti garantiscono un comfort di guida e una sicurezza ottimali.



#PerformanceL'Ispirazione

Assistenza potente fino a 25 km/h. In pianura o in collina: Il sistema di trazione dell'HUSK-E vi supporta fino a 25 km/h. Percorrete distanze più lunghe senza fatica e godetevi la libertà di movimento.



#CompattoEFlessibile

HUSK-E rivoluziona il trasporto delle handbike: il supporto del movimento centrale ripiegabile consente di ridurre le dimensioni della bici adattiva in modo rapido e semplice. Ideale per i viaggi e per riporre il Bike in spazi ridotti.



#ResistenzaPerOgniTour

Grande capacità della batteria e opzione della doppia batteria. Con un'autonomia fino a 100 km e l'opzione di un doppio supporto per la batteria, anche i tour più lunghi non sono un problema.



#TreVariantiPerOgniRequisito


HUSK-E è disponibile in versione Shimano (prestazioni intelligenti), Bafang (piena potenza fin dal primo giro di pedale) o manuale, a seconda delle vostre esigenze.



CONFIGURABILE IN MODO FLESSIBILE PER OGNI ESIGENZA.

La **HUSK-E** si adatta a voi, sia con assistenza elettrica che come bici manuale senza motore. Marce, freni e regolazioni ergonomiche garantiscono il massimo comfort. Il supporto del movimento centrale ripiegabile, il pratico cavalletto e il lungo raggio d'azione la rendono ideale per il turismo e facile da trasportare.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:

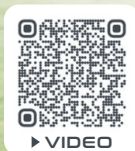

Adattamento affidabile e maneggevolezza. L'HUSK-E si fissa rapidamente alla carrozzina utilizzando l'adattatore centrale o anteriore. Il pratico supporto di parcheggio facilita inoltre l'aggancio e lo sgancio.



Ergonomia perfetta per il massimo comfort. Le ampiezze delle impugnature e le lunghezze delle pedivelle, così come il supporto del movimento centrale regolabile, rendono l'HUSK-E il vostro compagno ideale.



La versione manuale dell'HUSK-E offre un'esperienza di guida sportiva senza motore. Ideale per chi vuole pedalare attivamente e migliorare la propria resistenza.






Come opzione sono disponibili borse porta-bagagli con portaoggetti. Le borse, con un volume di 5,8 litri, offrono spazio sufficiente per la spesa.

DATI TECNICI

Motori: [se dotato di supporto elettrico]	Shimano 85 Nm 3,0 kg Bafang 110/130 Nm 3,3 kg
Batterie: [se dotato di supporto elettrico]	Shimano 36 V 14 Ah 504 Wh 2,6 kg Autonomia di ca. 45 - 75 km Shimano 36 V 17,5 Ah 630 Wh 3,5 kg Autonomia di ca. 55 - 85 km Bafang 48 V 14,5 Ah 696 Wh 3,77 kg Autonomia di ca. 60 - 100 km
Peso totale senza adattatore:	Per la versione elettrica: da 14,1 kg (senza batteria) Per la versione manuale: da 11,4 kg
Ingombro:	da 80 x 43 x 80 cm
Possibili dimensioni delle ruote anteriori:	20"
Ausilio di spinta / Partenza assistita: [se dotato di supporto elettrico]	Shimano: fino a 4 km/h in avanti Bafang: fino a 6 km/h in avanti

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

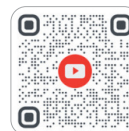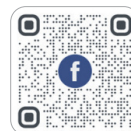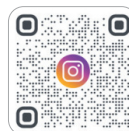

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 08/2026

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.