



PROACTIV®



BUDDY


LA CARROZZINA PER BAMBINI PER L'AVVENTURA DELLA VITA.

Il **BUDDY** è una sedia a rotelle compatta e particolarmente versatile per bambini e ragazzi, che cresce insieme a loro ed è pronta a tutto: vita quotidiana, terapia, parco giochi o lunghe gite. Favorisce l'autonomia, la mobilità e lo sviluppo terapeutico e accompagna i bambini per molti anni in modo sicuro e affidabile. Con la sua robusta struttura del telaio, l'intelligente funzione di adattamento alla crescita e le numerose opzioni, BUDDY si adatta in modo ottimale alla vita del bambino – e non viceversa.



#FunzioneDiCrescita

Il BUDDY cresce insieme al bambino in larghezza, altezza e profondità. Grazie alla seduta regolabile con precisione e alla regolazione del punto di inclinazione, si adatta alle sue esigenze, rimanendo un fedele compagno per molti anni.

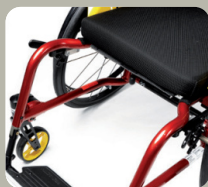

#PosturaSana

Il BUDDY favorisce una postura corretta da seduti e stimola movimenti coordinati – la forma ad abduzione del telaio garantisce maggiore spazio per le gambe e possibilità di posizionamento ottimali.



#FrenataIntelligente

Il BUDDY offre diversi sistemi di frenata a leva a ginocchio, adattati alle esigenze del bambino e dell'accompagnatore. Particolarmente adatto ai bambini è il sistema di frenata a leva a ginocchio integrato nella protezione per gli indumenti.



#Supporto

Due sistemi di schienale garantiscono un comfort di seduta ottimale: uno schienale regolabile leggero con possibilità di regolazione personalizzata oppure una conchiglia stabile con supporto lombare.




CONFIGURABILE INDIVIDUALMENTE PER OGNI ESIGENZA

Il **BUDDY** può essere personalizzato in base alle proprie esigenze grazie a numerose opzioni. Che si tratti di comando a una mano, tavolo terapeutico, ruota anteriore Outdoor, poggipiedi flessibili o diversi sistemi di frenata e di sostegno per la schiena, ogni accessorio si adatta alle esigenze individuali del bambino.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Il "poggipiedi ribaltabile all'indietro" facilita il trasferimento dei bambini ancora in grado di stare in piedi.

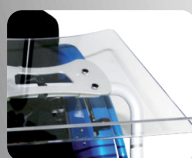

Il tavolo terapeutico offre una pratica superficie da lavoro, può essere rimosso senza attrezzi ed è regolabile in continuo in altezza e angolazione per una personalizzazione ottimale.



La **ruota anteriore Outdoor** rende la BUDDY adatta all'uso fuoristrada su marciapiedi, ghiaia e sentieri forestali. Sollevata da terra e la ruota da 12" supera i dossi senza sforzo. Grazie al morsetto a sgancio rapido, l'attacco della ruota può essere montato facilmente e senza attrezzi.





DATI TECNICI

Larghezza del sedile:	20 - 46 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	22 - 40 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	20 - 47 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	31 - 37 cm [pneumatici 20"] 33,5 - 39,5 cm [pneumatici 22"] 36 - 42 cm [pneumatici 24"] (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	40 - 47 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	5 - 10 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 9,5 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 100 kg

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

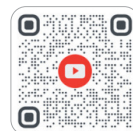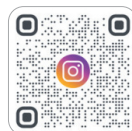

PRO ACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 06/2026
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.