



PROACTIV®



WHEEL-E

MASSIMA POTENZA DI TRAZIONE E CONTROLLO PER QUALSIASI TERRENO

Il dispositivo di trazione **WHEEL-E** trasforma la vostra sedia a rotelle in un potente compagno per qualsiasi percorso. Grazie alle ruote da 20", ai pneumatici larghi e al baricentro basso, potrete affrontare con facilità sentieri asfaltati, piste forestali e pendenze. La batteria offre un'autonomia fino a 45 km, estendibile a 90 km con una doppia batteria. Grazie al cruise control e alla stabile geometria dello sterzo, potrete godere del massimo comfort e della massima sicurezza. Gli accessori versatili consentono la personalizzazione, per una mobilità indipendente su qualsiasi terreno!



#ViaggiareInModoIndipendente

Attivate l'acceleratore con un semplice gesto del polso e rotolate senza fatica su marciapiedi, sentieri forestali o pendenze grazie alla ruota da 20" e ai pneumatici larghi.



#PiùVelocità

A seconda dell'equipaggiamento, è possibile raggiungere velocità di 6 km/h, 15 km/h (in opzione con licenza di esercizio individuale) o 24 km/h. In città, fuori strada o su strade private: la scelta è vostra.



#FortePendenza

Capacità di arrampicata fino al 15%. Con la potente trasmissione al mozzo Triride, potrete affrontare anche le pendenze più impegnative. Perfettamente combinata con 5 livelli di supporto e una retromarcia per una maggiore flessibilità.



#DueVoltePiùLontano

Per viaggi brevi o lunghi: fino a 45 km di autonomia con una sola batteria. Con la doppia batteria opzionale, l'autonomia può essere raddoppiata e il collegamento a spina intercambiabile facilita la sostituzione della batteria.



PERSONALIZZATO PER VOI.

Il **WHEEL-E** si adatta perfettamente alle vostre esigenze: Grazie al piantone dello sterzo regolabile in lunghezza, angolo e altezza, è possibile trovare la posizione ideale del manubrio. Anche l'adattatore flessibile può essere regolato in altezza, lunghezza e angolazione, per il massimo comfort e controllo.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Il robusto adattatore centrale o anteriore può essere montato con poche semplici operazioni e non aggiunge quasi alcun peso alla carrozzina.



Controllo della velocità di crociera per viaggi rilassati. Per godere di una velocità costante basta premere un pulsante. Nessuna regolazione, nessuno stress: solo puro piacere di guida.



L'individualità conta. Grazie ad accessori come parafanghi, portapacchi e specchietti retrovisori, il WHEEL-E può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, anche per gli utenti con disabilità funzionali.



fino a 170 kg

150 kg sono già possibili di serie. È possibile raggiungere un carico rimorchiabile fino a 170 kg previa verifica tecnica dell'allestimento e con l'adattatore Heavy Duty. Carichi rimorchiabili superiori su richiesta.






DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Motore:	Motore al mozzo: Triride I max. 1000 W
Batterie:	Triride 48 V 10,5 Ah 504 Wh autonomia di ca. 25 - 45 km 3,3 kg
Doppia batteria:	Possibile; commutazione tramite dispositivo di riposizionamento sul supporto del cuscinetto di movimento
Peso totale senza adattatore:	da 14,7 kg (senza batteria)
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 150 kg di carico rimorchiato e 10 kg di carico utile
Ingombro:	ab 90-110 x 63 x 62 cm
Dimensioni della ruota motrice:	20"
Velocità sistema di azionamento:	6 km/h (Svizzera: 10 km/h), 15 km/h (consentito solo con licenza individuale di esercizio in Germania in aree pubbliche e nel traffico stradale), 24 km/h (consentito solo su proprietà private in Germania)

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

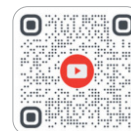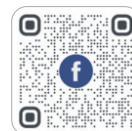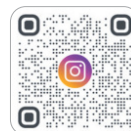

PRO ACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2026_01
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.