





PROACTIV®

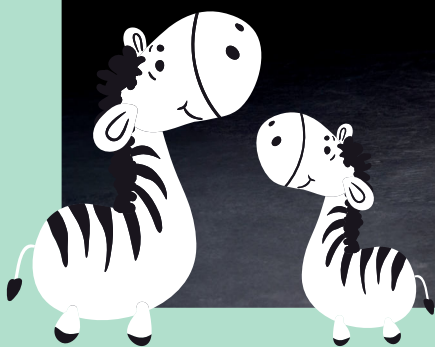

LITTY 4all

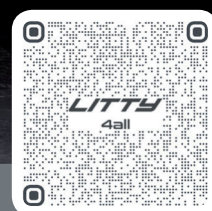

LE FAUTEUIL ROULANT LÉGER ET STABLE POUR ENFANT, QUI GRANDIT AVEC SON AVENTURIER.

Le fauteuil roulant pour enfant **LITTY 4all** a été développé spécialement pour les petits aventuriers. Avec sa géométrie de cadre optimale et ses nombreuses possibilités de réglage, il s'adapte parfaitement aux besoins des enfants. Son faible poids partant de 6,7 kg et sa résistance au roulement particulièrement faible font de lui un accompagnateur idéal, même pour les enfants ayant peu de motricité dans les bras. Sur le LITTY 4all, neuf paramètres de cadre sont réglables pour adapter le fauteuil roulant individuellement et la largeur d'assise est déjà possible à partir de 18 cm.




#FonctionCroissance

Le LITTY 4all grandit avec l'enfant grâce aux modules échangeables et reste un accompagnateur fidèle au fil des ans.



#PositionD'assiseParfaite

Le cadre sans tube avant limitant permet un positionnement du siège en abduction maximale.

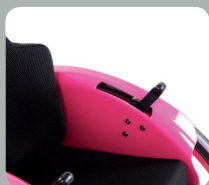

#Sécurité

La commande du frein à pousser est disposée de manière ergonomique dans le protège-vêtements et l'axe de frein est placé à l'extérieur de la zone de saisie afin d'éviter le coincement des doigts.



#Assistance

Les différentes poignées et arceaux de poussée permettent une assistance lors de la poussée tandis que les freins de l'accompagnateur permettent de contrôler la vitesse.



PARFAITEMENT ADAPTÉ ET TOUJOURS PRÊT POUR LA PROCHAINE AVENTURE.

Le **LITTY 4all** est fabriqué sur mesure selon les besoins de l'enfant, depuis les dimensions du cadre jusqu'à l'équipement. Il est possible de choisir parmi de nombreuses options, dont les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes de dossier et d'assise ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



Le « repose-pieds relevable vers l'arrière » facilite pour les enfants encore capables de se tenir debout le transfert dans et hors du fauteuil roulant.



La tablette thérapeutique offre un plan de travail pratique, se retire sans outil, est réglable en hauteur et en inclinaison pour une adaptation optimale.



Avec la **fourche à roue tout chemin**, le LITTY 4all est apte au tout terrain pour les pavés, les graviers et les chemins forestiers. Les roues avant se soulèvent du sol et la roue de 12 pouces franchit sans peine les irrégularités. Grâce aux leviers de serrage rapide, la fourche à roue se pose facilement et sans outil.



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	18 - 34 cm (en pas de 2 cm)
Profondeur d'assise :	20 - 35 cm (en pas de 5 cm)
Hauteur dossier :	20 - 35 cm (en pas de 5 cm)
Longueur de potence :	20 - 44 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	31 - 41 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	34 - 44 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	5 - 9 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 6,7 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 50 kg

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/