



PROACTIV®



SPEEDY 4all Ergo

MOBILITÉ QUI S'ADAPTE À TOI.

Le **SPEEDY 4all Ergo** est un fauteuil roulant à cadre rigide actif qui se caractérise par une géométrie du cadre filigrane avec pliage ergonomique du siège. Avec ses neuf paramètres de cadre, il peut s'adapter parfaitement à toi. De nombreux réglages peuvent être effectués ultérieurement : le point de basculement, les hauteurs et/ou l'inclinaison de l'assise ainsi que l'inclinaison du dossier peuvent être adaptés à l'évolution de tes besoins.




#Fiabilité

Cadre stable et durable pour une mobilité maximale et une compatibilité avec des entraînements et des adaptateurs supplémentaires.



#PlusDeMobilité

Les appareils de traction et bikes adaptatifs peuvent s'accoupler en quelques gestes via un adaptateur ; extension d'empattement en option pour une traction supplémentaire.

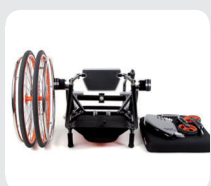

#Autonomie

Dépliage simple du dossier et retrait sans outil des modules permettent un transport autonome.



#Flexibilité


Réglage intégré du point de basculement et de la hauteur d'assise en pas de 1 cm pour une adaptation optimale à tes besoins.




PARFAITEMENT ADAPTÉ À TOI.

Le SPEEDY 4all Ergo est une fabrication sur mesure conforme à tes besoins. Tu peux choisir parmi une large gamme d'équipements sélectionnables au niveau des repose-pieds, des freins, des poignées de poussée, des systèmes de dossier et d'assise, des protège-vêtements, des accoudoirs ainsi que des roues d'entraînement et des roues avant.


OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :

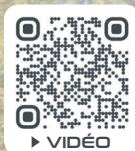

L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.

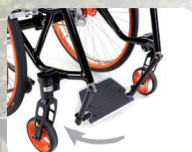

Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.

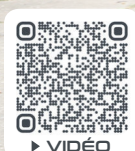

Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.




Frein de stationnement intégral esthétique avec commande confortable et sûre.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	30 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	36 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	37 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	38 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	44 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	3 - 11 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 9,7 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 150 kg Dimensions individuelles correspondantes sur demande

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

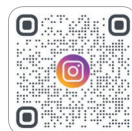

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

D-72359 Dotternhausen

info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.