



PROACTIV®



TRAVELER 4you Ergo

PERFETTA VESTIBILITÀ SODDISFA LE DIMENSIONI PIÙ RIDOTTE DELLO ZAINO.

TRAVELER 4you Ergo è la vostra carrozzina pieghevole attiva personalizzata, con una geometria del telaio in filigrana e un angolo di seduta ergonomico. È possibile scegliere 12 parametri del telaio, come l'angolo di inclinazione delle ginocchia, l'arretramento del telaio, l'interasse o la posizione dei cuscinetti delle ruote. Il telaio viene prodotto come pezzo unico in base ai vostri desideri. Grazie alle dimensioni compatte di 17 x 35 x 58 cm, potete portare con voi la TRAVELER 4you Ergo anche in una borsa sportiva. Molte impostazioni, come il punto di ribaltamento, l'altezza del sedile, l'inclinazione del sedile o l'angolo dello schienale, possono essere adattate alle vostre esigenze anche in un secondo momento.




#Affidabilità

Grazie alla sua straordinaria stabilità, è possibile combinare la TRAVELER 4you Ergo con bike adattivi, dispositivi di trazione e aggancio e altri adattamenti.



#Individualità

Con 12 parametri selezionabili, ogni telaio è unico. L'asta del telaio può essere progettata con una retenzione del telaio.

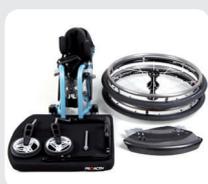


#Autonomia

Grazie alle dimensioni ridotte, allo schienale ribaltabile e ai componenti staccabili senza attrezzi, il TRAVELER 4you Ergo è facile da trasportare.



#Più Mobilità

Semplicemente ripiegando il sedile, è possibile ridurre la larghezza della seduta (quando si è seduti nella carrozzina) del 15% o di 5-10 cm, in modo da poter passare agevolmente attraverso passaggi stretti.

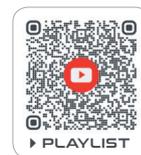

PERSONALIZZATA, PROGETTATA ERGONOMICAMENTE.

La **TRAVELER 4you Ergo** è personalizzata in base alle vostre esigenze, dalle dimensioni del telaio all'equipaggiamento. Potrete scegliere tra opzioni quali supporti per i piedi, freni, maniglie di spinta, sistemi di sedili e schienali, protezioni per gli abiti, braccioli e ruote motrici e di supporto per personalizzare la vostra TRAVELER alla perfezione.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggipiedi, ripiegabile verso la parte posteriore e dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.



PACCHETTO VERSIONE "PURE":

Con questa versione si raggiunge un peso totale particolarmente leggero di soli 10 kg, stabilendo nuovi standard in termini di leggerezza. Offre caratteristiche innovative e ottimizzate per il peso, come i pannelli laterali in carbonio con protezione integrata per i vestiti, uno schienale "leggero" adattabile con imbottitura e un poggipiedi leggero con una pedana arrotondata che non sporge.



DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	33 - 52 cm (con intervalli di 1 cm) 33 - 42 cm con l'equipaggiamento "pure"
Profondità del sedile:	35 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	22 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	37 - 51 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	39 - 47 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	42 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	3 - 11 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 11,2 kg da 10,0 kg con l'equipaggiamento "pure"
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/