



PROACTIV®



SPEEDY 4all Ergo

MOBILITÀ, CHE SI ADATTA A VOI.

La **SPEEDY 4all Ergo** è una carrozzina attiva a telaio rigido caratterizzata da una delicata geometria del telaio con angolo di seduta ergonomico. Con 9 parametri del telaio, può essere personalizzata in modo ottimale. Molte regolazioni possono essere effettuate anche in un secondo momento: Il punto di inclinazione, l'altezza e l'inclinazione del sedile e l'angolo dello schienale possono essere continuamente adattati alle vostre esigenze.




#Affidabilità

Telaio robusto e durevole per la massima mobilità e compatibilità con unità aggiuntive e adattamenti.



#Più Mobilità

I dispositivi di traino e i Bike adattivi possono essere collegati in pochi semplici passaggi grazie agli adattatori; estensione del passo opzionale per una maggiore trazione.

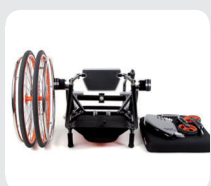

#Autonomia

Il semplice ripiegamento dello schienale e la rimozione senza attrezzi dei gruppi consentono un trasporto indipendente.



#Flessibilità


Punto di inclinazione integrato e regolazione dell'altezza del sedile con incrementi di 1 cm per una personalizzazione ottimale in base alle proprie esigenze.



PERFETTAMENTE PERSONALIZZATA PER VOI.

La **SPEEDY 4all Ergo** è personalizzabile in base alle vostre esigenze. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di equipaggiamenti opzionali in termini di poggiatesta, freni, maniglie di spinta, sistemi di schienale e sedili, protezioni per gli abiti, braccioli e ruote motrici e piroettanti.


OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:

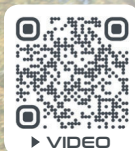

Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggiatesta, ripiegabile verso la parte posteriore e dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.

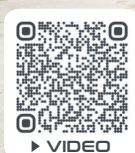

Manovrabile con una sola mano e anello a doppia impugnatura per utenti con emiplegia o mobilità limitata su un lato del corpo (versione monoguida).




Elegante freno di stazionamento integrale con funzionamento comodo e sicuro.

DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	30 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	36 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	37 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	38 - 47 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	44 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	3 - 11 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 9,7 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 150 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

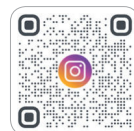

PRO ACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2024
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.