



PROACTIV®



BUDDY

LE FAUTEUIL ROULANT POUR ENFANTS POUR UNE VIE PLEINE D'AVENTURES.

Le **BUDDY** est un fauteuil roulant compact et particulièrement adaptable destiné aux enfants et aux adolescents, qui évolue avec eux et s'adapte à toutes les situations : la vie quotidienne, la thérapie, les aires de jeux ou les grandes sorties. Il favorise l'autonomie, la mobilité et le développement thérapeutique, et accompagne les enfants pendant de nombreuses années en toute sécurité et fiabilité. Grâce à son châssis robuste, à sa fonction intelligente d'adaptation à la croissance et à ses nombreuses options, c'est le BUDDY qui s'adapte de manière optimale à la vie de l'enfant, et non l'inverse.



#FonctionCroissance

Le BUDDY grandit avec l'enfant : largeur, hauteur et profondeur réglables. Grâce aux ajustements précis de l'assise et du point de bascule, il s'adapte à ses besoins pendant des années.



#PostureSaine

Le BUDDY favorise une posture assise saine et encourage les mouvements coordonnés – la forme en abduction du cadre offre ainsi un espace supplémentaire pour les jambes et des possibilités de positionnement optimales.



#FreinageIntelligent

Différents systèmes de frein à levier adaptés aux besoins de l'enfant et de l'accompagnant. Le frein intégré au protège-vêtements est particulièrement facile à utiliser pour les enfants.



#Assistance

Deux systèmes de dossier garantissent un confort d'assise optimal : un dossier ajustable et léger offrant des possibilités de réglage personnalisées ou une coque de dossier stable avec soutien lombaire.




CONFIGURABLE SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Le **BUDDY** peut être adapté précisément à vos besoins grâce à de nombreuses options. Qu'il s'agisse d'une commande à une main, d'une table de thérapie, d'un kit de roues pour l'extérieur, de repose-pieds flexibles ou de différents systèmes de freinage et de soutien dorsal, chaque accessoire s'adapte aux besoins individuels de l'enfant.

DES OPTIONS UNIQUES PROPOSÉES PAR PRO ACTIV :



Le « repose-pieds rabattable vers l'arrière » facilite pour les enfants encore capables de se tenir debout le transfert dans et hors du fauteuil roulant.

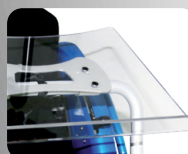

La tablette thérapeutique offre un plan de travail pratique, se retire sans outil, est réglable en hauteur et en inclinaison pour une adaptation optimale.



Avec la **fourche à roue tout chemin**, le BUDDY est apte au tout terrain pour les pavés, les graviers et les chemins forestiers. Les roues avant se soulèvent du sol et la roue de 12 pouces franchit sans peine les irrégularités. Grâce aux leviers de serrage rapide, la fourche à roue se pose facilement et sans outil.






DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	20 - 46 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	22 - 40 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	20 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	31 - 37 cm [pneus 20"] 33,5 - 39,5 cm [pneus 22"] 36 - 42 cm [pneus 24"] (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	40 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	5 - 10 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 9,5 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 100 kg

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

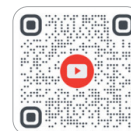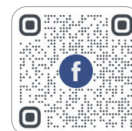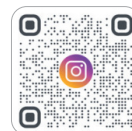

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

D-72359 Dotternhausen

info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rev. 06/2026

Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.