



PROACTIV®




**ROBUSTE, POLYVALENT,
EXACTEMENT COMME TU EN AS BESOIN.**

SPEEDY

A1

Le **SPEEDY A1** est un multitool parmi les fauteuils roulants à cadre rigide. Le cadre extrêmement robuste t'offre une stabilité maximale et peut être équipé de nombreuses options, de différents accessoires et de constructions spéciales. Ainsi, le fauteuil roulant peut être adapté et transformé de manière optimale pour des personnes pesant jusqu'à 300 kg ou pour des personnes mesurant 2 m ou plus.

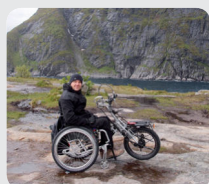

#PlusDeMobilité

Les bikes adaptatifs et les appareils de traction puissants peuvent s'accoupler en quelques gestes via un adaptateur.




#Fiabilité

Le SPEEDY A1 séduit par son cadre conçu pour les charges extrêmes et compatible avec différents entraînements et adaptateurs.



#Flexibilité

Certains réglages peuvent être réalisés également a posteriori : le point de basculement, les hauteurs et/ou l'inclinaison de l'assise ainsi que l'inclinaison du dossier peuvent être adaptés à tes besoins.

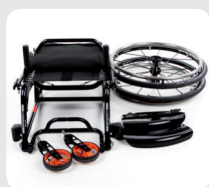

#Autonomie

Grâce au dossier pliant et au retrait sans outil des modules, le SPEEDY A1 est facile à transporter.



ADAPTATION PARFAITE. FIABILITÉ MAXIMALE.

Ton **SPEEDY A1** est fabriqué sur mesure selon tes souhaits. Tu détermènes les dimensions du cadre et tu choisis parmi de nombreuses options, depuis les repose-pieds en passant par les freins et les poignées de poussée jusqu'aux systèmes d'assise et de dossier ainsi que les roues. Ton fauteuil roulant exactement comme tu en as besoin.


OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.

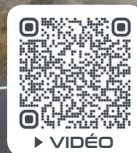

Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.




Avec l'équipement Heavy Duty, ton SPEEDY A1 est conçu également pour des charges très lourdes, comme un poids utilisateur allant jusqu'à 300 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	30 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	36 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	33 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	37 - 45 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	44 - 54 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	4 - 13 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 9,9 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 300 kg Dimensions individuelles correspondantes sur demande

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

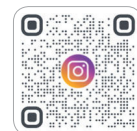

PRO^oACTIV[®]

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

D-72359 Dotternhausen

info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 11/2025_01

Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.