



PRO[®]ACTIV



HUSK-E


POTENTE E INCREDIBILMENTE PICCOLO DURANTE IL TRASPORTO

Il Bike adattivo HUSK-E combina flessibilità, prestazioni e comfort in un design compatto. Il supporto del movimento centrale ripiegabile garantisce un ingombro ridotto, ideale per il trasporto. È possibile scegliere tra tre versioni: il potente **modello Shimano** per i terreni montani, la **versione Neodrive** silenziosa e a risparmio energetico per i terreni più pianeggianti e la **versione manuale** per l'auto-propulsione sportiva. Per i bambini e i ragazzi più grandi, l'HUSK-E è disponibile con un supporto per il movimento centrale corto. La selezione personalizzata delle marce, le opzioni di regolazione ergonomiche e i freni efficienti garantiscono un comfort di guida e una sicurezza ottimali.



#PerformanceL'Ispirazione

Assistenza potente fino a 25 km/h. In pianura o in collina: Il sistema di trazione dell'HUSK-E vi supporta fino a 25 km/h. Percorrete distanze più lunghe senza fatica e godetevi la libertà di movimento.

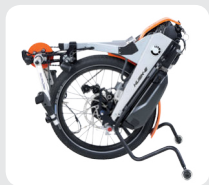

#CompattoEFlessibile

HUSK-E rivoluziona il trasporto delle handbike: il supporto del movimento centrale ripiegabile consente di ridurre le dimensioni della bici adattiva in modo rapido e semplice. Ideale per i viaggi e per riporre il Bike in spazi ridotti.



#ResistenzaPerOgniTour

Grande capacità della batteria e opzione della doppia batteria. Con un'autonomia fino a 85 km e l'opzione di un doppio supporto per la batteria, anche i tour più lunghi non sono un problema.



#TreVariantiPerOgniRequisito



HUSK-E è disponibile in versione Shimano (potente per i terreni montani), Neodrive (silenziosa e a risparmio energetico per i terreni più pianeggianti) o manuale, a seconda delle vostre esigenze.



CONFIGURABILE IN MODO FLESSIBILE PER OGNI ESIGENZA.

La **HUSK-E** si adatta a voi, sia con un sistema di trasmissione Shimano o Neodrive, sia come Bike manuale senza motore. Marce, freni e regolazioni ergonomiche garantiscono il massimo comfort. Il supporto del movimento centrale ripiegabile, il pratico cavalletto e il lungo raggio d'azione la rendono ideale per il turismo e facile da trasportare.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:

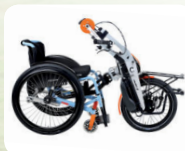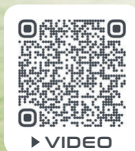

Adattamento affidabile e maneggevolezza. L'HUSK-E si fissa rapidamente alla carrozzina utilizzando l'adattatore centrale o anteriore. Il pratico supporto di parcheggio facilita inoltre l'aggancio e lo sgancio.



Ergonomia perfetta per il massimo comfort. Le ampiezze delle impugnature e le lunghezze delle pedivelle, così come il supporto del movimento centrale regolabile, rendono l'HUSK-E il vostro compagno ideale.



La versione manuale dell'HUSK-E offre un'esperienza di guida sportiva senza motore. Ideale per chi vuole pedalare attivamente e migliorare la propria resistenza.




Come opzione sono disponibili borse porta-bagagli con portaoggetti. Le borse, con un volume di 5,8 litri, offrono spazio sufficiente per la spesa.

DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Motori: [se dotato di supporto elettrico]	Motore centrale: Shimano 85 Nm 250 W 2,7 kg
	Motore al mozzo: Neodrive 12/40 Nm 250 W 4,6 kg
Batterie: [se dotato di supporto elettrico]	Shimano 36 V 14 Ah 504 Wh 2,6 kg
	Autonomia di ca. 45 - 75 km
	Shimano 36 V 17,5 Ah 630 Wh 3,5 kg
	Autonomia di ca. 55 - 85 km
	Neodrive 36 V 16 Ah 576 Wh 3,6 kg
	Autonomia di ca. 45 - 75 km
Peso totale senza adattatore:	Per la versione elettrica: da 14,1 kg (senza batteria) Per la versione manuale: da 11,4 kg
Ingombro:	da 80 x 43 x 80 cm
Possibili dimensioni delle ruote anteriori:	20"
Ausilio di spinta / Partenza assistita: [se dotato di supporto elettrico]	fino a 4 km/h in avanti (Shimano) fino a 6 km/h in avanti e 1,5 km/h indietro (Neodrive)

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

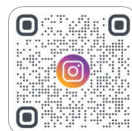

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 05/2025
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.