



PROACTIV®



30cm



LIFT
activ


AVEC LIFT ACTIV
TU ATTEINS PLUS.

Le **LIFT activ** avec réglage de la hauteur d'assise te permet d'être flexible au quotidien ainsi que dans de nombreux métiers et différents postes de travail. Tu peux atteindre sans effort des machines, des meubles, des équipements de cuisine, des imprimantes et des étagères – souvent sans aucun aménagement particulier. Avec un poids de seulement 14,5 kg, le **LIFT activ** séduit par son design léger et dynamique et par sa facilité de transport. Outre la version mécanique, le **LIFT activ** est également disponible en version électrique. Celle-ci te permet de régler la hauteur du siège de manière confortable et en continu d'une simple pression sur un bouton – idéal pour encore plus d'autonomie, d'efficacité et d'ergonomie au quotidien et au travail.



#Indépendance

Avec le **LIFT activ**, tu maîtrises ton quotidien de manière encore plus autonome. En faisant les courses, tu peux atteindre les produits en haut des étagères sans aide extérieure et tu es indépendant.

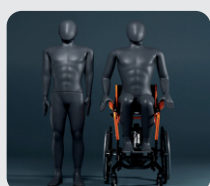

#ÀHauteurDeRegard

Avec le réglage continu de la hauteur d'assise, le siège se relève jusqu'à 30 cm. Dans cette position, tu te trouves à hauteur de regard avec une personne debout mesurant env. 1,75 m.




#ConfortSurPressionD'unBouton

Le **LIFT activ** électrique te permet de régler la hauteur de l'assise en continu d'une simple pression sur un bouton – avec précision et sans effort, pour plus d'autonomie au quotidien.



#Autonomie

Grâce à l'optimisation du poids, au dossier pliant et au retrait sans outil des modules, tu peux transporter aisément ton **LIFT activ**.

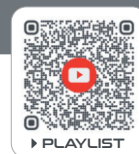


TA CLÉ POUR PLUS D'INDÉPENDANCE.

Ton **LIFT activ** est fabriqué sur mesure pour toi en s'adaptant à tes besoins. Tu as un grand choix d'équipements, depuis les repose-pieds et les freins en passant pour les poignées de poussée jusqu'aux systèmes d'assise et de dossier ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant. De cette manière, ton LIFT activ est exactement comme tu en as besoin.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.

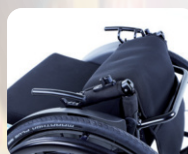

Le dossier rabattable au niveau de l'articulation lombaire permet également d'optimiser rapidement et facilement les dimensions de rangement pour le transport.



La potence amovible et pivotante avec repose-pieds à palette séparée offre beaucoup de place pour ton transfert.






Le repose-pieds replié vers l'arrière se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	35 - 46 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	35 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	30 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	41 - 43 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	45 - 51 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	6 - 10 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	mécanique : à partir de 14,5 kg électrique : à partir de 23 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 100 kg

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

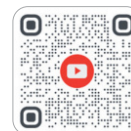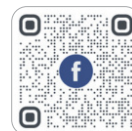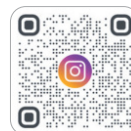

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/